


MANGO KEELER DE TAMAÑO C



**POR FAVOR, LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES
CUIDADOSAMENTE**

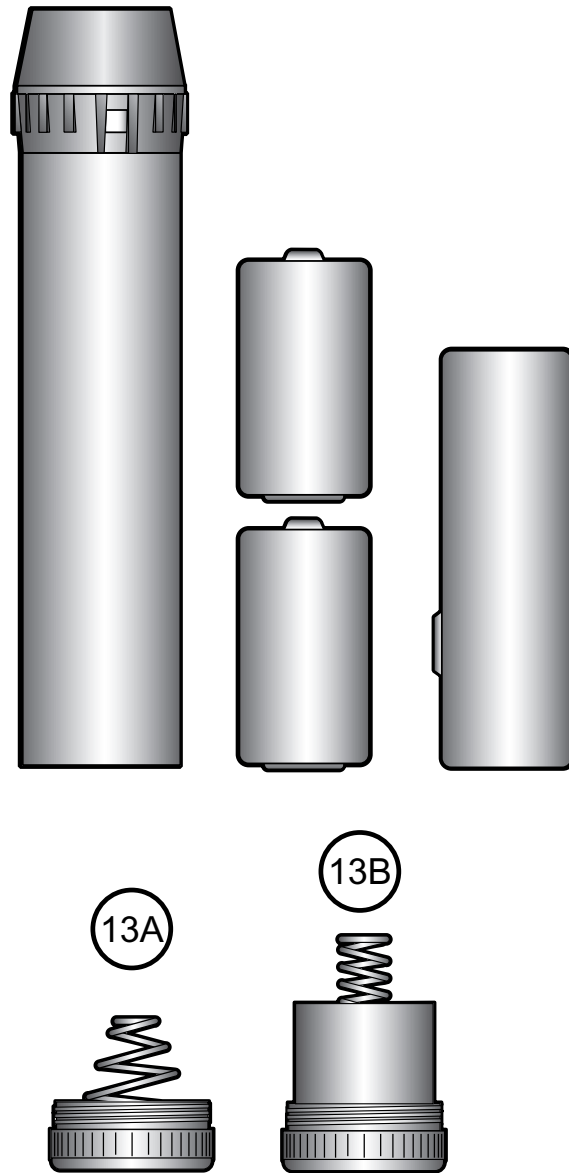

Mango Keeler de tamaño C

Lea atentamente este Apartado de Instrucciones antes de usar el producto Keeler.

Para su propia seguridad y la de sus clientes, contemple toda la información de índole preventiva incluida en este apartado. El objetivo de esta información es destacar los posibles riesgos asociados al mal manejo o avería del aparato.



Advertencia

Este producto no debe usarse en presencia de gases inflamables.

No desmonte o modifique la pila. No hay componentes reemplazables en su interior.

No tire la pila al fuego, no la perfore.

No use una pila deformada, con escapes, corroída o dañada a simple vista.

Si el producto desprende un olor extraño, calor o fuego, deje de usarlo inmediatamente. El uso continuado de un producto o componente dañado puede causar lesiones.

No sumerja la unidad en ningún líquido

No use la unidad si está dañada e inspecciónela periódicamente de manera visual por si hubiera signos de avería.

Sólo los mangos Keeler, es decir, pueden usarse en el cargador Keeler. No intente insertar un mango Keeler con base azul en los cargadores Keeler. Remítase a la identificación de mango y bombilla Keeler.

Precaución

Saque las pilas secas antes de que el aparato permanezca sin usarse durante periodos prolongados.

Use sólo la pila recargable Keeler Pt. No. 1919-P-7069

Cárguela usando cargadores Keeler.

No mezcle pilas de tipos distintos.

No cargue la pila en un ambiente cuya temperatura pueda exceder los 40°C o descender por debajo de 0°C.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

No lo introduzca en un enchufe de alimentación eléctrica averiado.

Indicado sólo para el uso en interiores (proteger contra la humedad)

Para prevenir que se forme condensación, deje que el aparato alcance la temperatura de la habitación antes de usarlo.

Cuando conecte los cabezales de los instrumentos a los mangos, compruebe que el voltaje de la bombilla en el instrumento se corresponde con el voltaje del mango.


Asegúrese de que el control se encuentre en posición off cuando se haya completado el examen.

Cuando sustituya la célula recargable, apague el mango e inserte la nueva célula. Vuelva a colocar la tapa posterior y ponga el mango en la base del cargador.

Medio ambiente


Deseche de la pila según la reglamentación local en cuanto a reciclaje de pilas.

Cubra los contactos de la pila para evitar un cortocircuito cuando la tire.

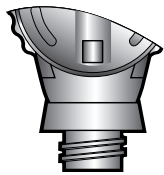


Conexión de los cabezales de los instrumentos a los mangos.


La conexión entre el cabezal del instrumento y el mango es de rosca. Para conectar el cabezal de nuestro instrumento, conecte como se muestra y gire en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese que la conexión entre el cabezal y el mango es positiva.

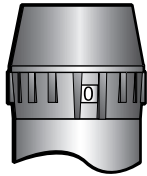

OFF

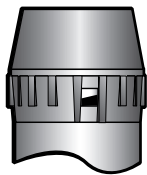

MELA CARGA

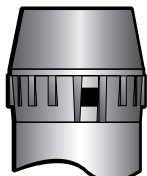

CARGA TOTAL

Compatibilidad

Los oftalmoscopios Keeler especialista, profesional, estándar y de médico y los retinoscopios Keeler son compatibles con los mangos Keeler Vista 2,8v y los Keeler 3,6v.

Control del brillo, encendido/ apagado

Para encender el instrumento haga girar el control del brillo como se indica hacia la derecha. Para apagar el instrumento haga girar el control del brillo como se indica hacia la izquierda. Los mangos Keeler de tamaño C tienen un indicador de potencia. Se mostrará lo siguiente si el instrumento está encendido o apagado

Rojo = encendido Plateado = apagado.

Identificación del mango

Los mangos Keeler de tamaño C están codificados por colores para permitirle distinguir entre un mango de pilas secas (2,8v) y un mango recargable (3,6v). Los mangos están codificados por

colores de la siguiente manera:

Base azul = 2,8v. para las pilas secas.

Base roja = 3,6v para las pilas recargables.

13A

13B

Las bombillas Keeler están codificadas por colores del mismo modo.

Base azul = 2,8v. para las pilas secas.

Base roja = 3,6v para las pilas recargables.

Al cambiar las pilas y las bombillas asegúrese que el voltaje corresponde con el mango.

Deshágase de las pilas viejas con cuidado de acuerdo con las regulaciones locales.



Insertar/ cambiar las pilas

Destornille la tapa de las pilas, introduzca las pilas y cambie la tapa de las pilas como se muestra.

Deben utilizarse las siguientes pilas secas:

Mango Keeler de tamaño C - 2 pilas de 1,5v de tamaño C. - Duracell MN 1400 o equivalentes.

Fíjese que los mangos recargables Keeler se suministran normalmente completos con una pila recargable.

(3.6v - 0.7Ah Ni-Cd)

Pase de las pilas a los mangos recargables.

Su Mango Keeler de pilas secas de 2,8 v de tamaño C (base azul) puede modernizarse con un mango recargable de 3,6v (base roja). Para los números de las piezas necesarias consulte la sección de accesorios Fíjese que la bombilla de su instrumento también necesitará actualizarse de 2,8v a 3,6 v. Para más información, póngase en contacto con el Servicio Keeler al 01753 857177.

Instrucciones de Carga Para Los Mangos Recargables Keeler de Tamaño C.



Advertencia

No intente cargar pilas que no son recargables.

Acondicionamiento de las pilas

Sus pilas recargables Keeler necesitan estar acondicionadas para asegurar que consigue la máxima duración del producto. Siga las instrucciones de acondicionamiento como se indica.

Paso 1

Cargue completamente su nueva pila recargable Keeler. Esto tardará 15 horas aproximadamente.

Paso 2

Utilice el instrumento SIN CARGAR HASTA QUE LA PILA ESTÉ COMPLETAMENTE VACÍA.

Paso 3

Una vez vacía cargue la pila hasta que esté llena. Esto tardará unas 15 horas aproximadamente.

Repita los pasos 1, 2 y 3 tres veces. i.e. cargue y descargue completamente la pila para completar el proceso de acondicionamiento.

Una vez que haya acondicionado sus pilas como se describe arriba puede colocar el instrumento en el cargador cuando no esté en uso entre revisiones.

Compatibilidad del cargador

Los mangos recargables Keeler pueden utilizarse con los siguientes cargadores Keeler:

Gama de cargadores Vista (único, doble, móvil)

Mini cargador Keeler

Cargador dúo Keeler.

Asegúrese que no está utilizando una alimentación de las de la lista

Cargadores que no son Keeler



Advertencia

Cargue su mango Keeler sólo con un cargador que proporcione un máximo de 65 mA de corriente.



Los mangos recargables Keeler de tamaño C pueden utilizarse con la mayoría de cargadores. Para cargar el instrumento con un cargador que no es Keeler asegúrese primero que el régimen de carga del cargador que no es Keeler es de un máximo de 65 mA de corriente. Luego retire el centro de la tapa base, utilizando una moneda. Su mango Keeler puede ahora cargarse con un cargador de otro fabricante.

Instrucciones de limpieza

El instrumento sólo debe limpiarse de forma manual sin sumergirlo en ningún líquido, de la siguiente manera:

1. Frote la superficie externa con un paño absorbente limpio, que no derrame, humedecido con agua / una disolución de detergente (2% por volumen) o agua / una disolución de alcohol isopropílico (70% por volumen).
2. Asegúrese de que la disolución sobrante no entra en el instrumento. Tenga cuidado en que el paño no esté empapado de disolución.
3. Las superficies deberían secarse a mano cuidadosamente usando un paño limpio que no derrame.
4. Deshágase con seguridad de los materiales de limpieza utilizados.

Garantía y reparación

No contiene componentes que el usuario pueda utilizar – todo el mantenimiento preventivo y reparación debe ser realizado por representantes autorizados por Keeler.

El mango Keeler tiene una garantía de 3 años y se cambiará o reparará gratuitamente cuando:

1. Se produzca cualquier fallo debido a una fabricación defectuosa.
2. La prueba de compra acompañe cualquier reclamación

FABRICADO EN EL REINO UNIDO POR:

Keeler Limited

Clewer Hill Road

Windsor

Berkshire SL4 4AA

England

Tel: +44 (0)1753 857177

Fax: +44 (0)1753 827145

Teléfono gratuito: 0800 521 251

DISTRIBUIDO POR:

Keeler Instruments Inc

456 Parkway

Broomall

PA 19008, USA

Gratuito: 1 800 523 5620

Tel: 610 353 4350

Fax: 610 353 7814

'La marca CE que aparece []
en este producto indica que []
ha sido probado y se []
adecua a las disposiciones []
de la Directiva 93/42/CEE []
sobre dispositivos médicos'



— A —
HALMA GROUP
C O M P A N Y



Distribuidor